



TRAITEMENTS D'ÉCLAIRCISSEMENT
Motiver, quantifier et prouver



PROTHÈSES FIXES
Couronnes, bridges, facettes



SOINS AU FAUTEUIL
CAD/CAM, composites



PROTHÈSES AMOVIBLES



Une solution
complète avec son
logiciel et plateforme
de communication

COBRA
SHADE SCAN

**Le scanner de teinte
multi-application !**

Technologie brevetée

Écran Oled tactile

Multi-teintiers

Spectrophotomètre
Analyses L*a*b* / L*C*h



Cobra offre une définition optimale et objective de la couleur


- **Ergonomique** : Appareil autocalibré léger et compact.
- **Précis** : Analyse multispectrale. Capteur Cmos 648 x 648 px.
- **Numérique** : 100% intégré, objectivité et traçabilité.
- **Hygiénique** : Embouts stérilisables.
- **Flexible** : Double flux vidéo (à l'écran de l'appareil et sur l'ordinateur)
- **Educatif** : Communiquez simplement avec vos patients.

TRAVAILLEZ L'ESPRIT TRANQUILLE GRÂCE À UNE CALIBRATION AUTOMATIQUE

Un embout multifonctions associé à une tête de mesure brevetée :

- **Précis** : Il permet un contrôle automatique de toutes vos acquisitions.
- **Objectif** : Il affranchit de toutes perturbations lumineuses extérieures.
- **Assisté** : Il assure un positionnement précis de l'appareil sur la dent et une maîtrise de la distance de travail pour une acquisition parfaite.
- **Hygiénique** : Il supprime toutes contaminations croisées et est conçu pour 100 cycles de stérilisation !



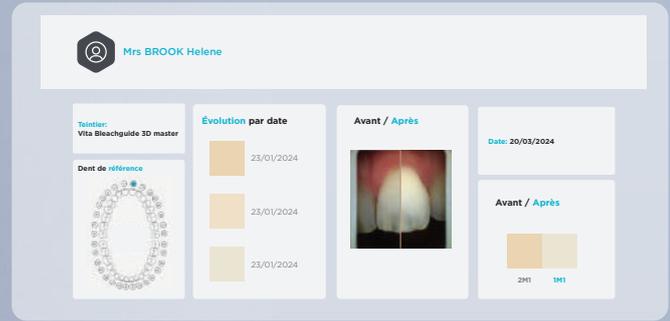


“ Réalisez des rapports d'éclaircissement et améliorez la communication avec vos patients !

- Analysez et archivez des acquisitions obtenues avec Cobra.
- Centralisez et gérez facilement les données esthétiques de vos patients.
- Visualisez des données esthétiques sous différentes cartographies de teintes.
- Analysez des valeurs CIE L*a*b* / L*C*h.
- Motivez vos patients et quantifiez vos traitements d'éclaircissement.
- Bénéficiez d'un logiciel gratuit pour le cabinet dentaire et le laboratoire.




Cartographies des teintes
(1, 3, 9 zones, cartographie détaillée)

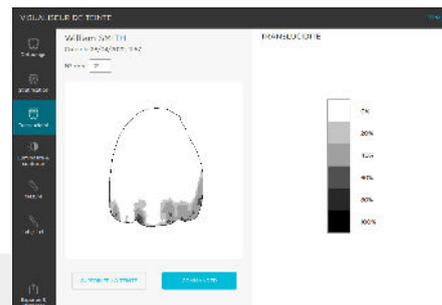

Cartographie de
la translucidité



Image polarisée couleur
et noir & blanc

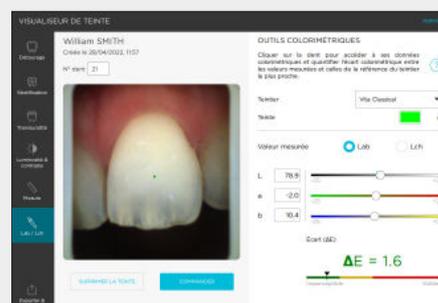

Analyses
CIE L*a*b* / L*C*h



SCANNEZ-MOI
pour découvrir un cas
clinique



Un accès simplifié aux informations de teinte tout en assurant une optimisation de la gestion de vos commandes.



Le Borea Connect qu'est-ce que c'est ?

- Une plateforme gratuite de création et gestion de commande (Accès cabinet et laboratoire).
- Un envoi facilité de vos données esthétiques (teintes, photos patient, empreinte numérique).
- Une accessibilité totale depuis un navigateur internet sur ordinateur, smartphone, tablette.

Spécifications techniques

Spectrophotomètre : plage de mesure 400-700 nm

Écran : Écran tactile Oled 1,5"

Résolution : 128 x 128 RGB

Capteur CMOS : 648 x 648 px

Batterie : Lithium-Ion

Dimension de la tête de mesure : L. 76 mm

Diamètre de la tête de mesure : Ø 25 mm

Dimensions de l'appareil : L. 200 x L. 42 x H. 35 mm

Dimensions de la base : L. 80 x l. 75 x. H. 55 mm

Poids de l'appareil : 169 g

Poids de la base : 124 g

Processeur : IMX8 Quad cores 1.8 Ghz

Communication : Wifi 802.11 b/g/n/ac

Alimentation : 5V 1Ah / USB A to Type C

Compatibilité :



Vision Pics App Solution :

Téléchargement gratuit



Contenu du pack:

Spectrophotomètre Cobra.

Station d'accueil.

Embouts de calibration x6 (Stérilisables).

Dongle wifi.

Chargeur.

Procédures de désinfection et de stérilisation.

Protocole d'utilisation.

Guide de démarrage rapide.

Lingette microfibre.

Cobra est un appareil électrique.

Il porte le marquage CE conformément aux exigences essentielles de sécurité et de performance des directives : (2014/35/UE - 2014/30/UE - 2014/53/UE)

Marquage CE : 2022. Fabriqué en France par BOREA. Pour usage professionnel seulement. Non remboursé par les caisses d'assurance maladie. Lire attentivement les instructions avant utilisation.

06/2025. Document non contractuel.

Ref. COBRA_BC_FR_V007_AE. Tous droits réservés.